



PIKAOHJE
SUOMI

icare
ic200




VIRRAN KYTKEMINEN TONOMETRIIN JA ANTURIN ASETTAMINEN PAIKALLEEN

1. Kytke tonometriin virta painamalla valinta- tai mittauspainiketta. Kuvat eri tavoista kytkeä virta:
(Muista käyttää rannehihnaa)

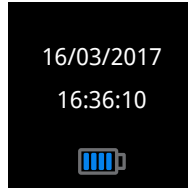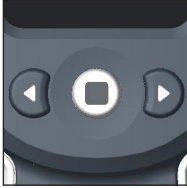


Tonometrin käynnistäminen painamalla valintapainiketta

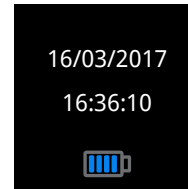

Tonometrin käynnistäminen painamalla mittauspainiketta

2. Avaa anturin putki poistamalla sen päältä suojus ja aseta anturi anturin kantaan kuvan mukaisesti.


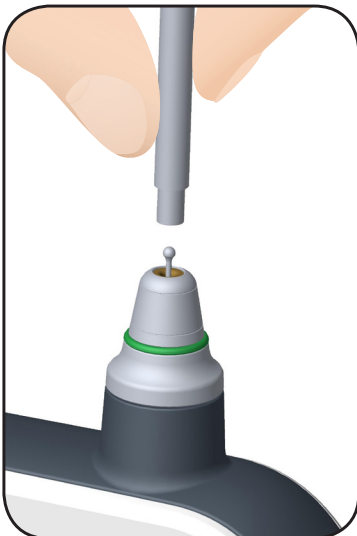


3. Kun näytössä on sininen nuoli, valitse OD (oikea silmä) tai OS (vasen silmä) siirtymispainikkeilla tai poistu valitsematta silmää. Tonometri on nyt valmis tekemään mittauksia.



Tonometri on valmis suorittamaan mittauksia. Valitse silmä: OD (oikea silmä), silmää ei valittu, OS (vasen silmä).

4. Tarkista, että otsatuki on ääriasennossa (mahdollisimman pitkällä) kiertämällä otsatuen säätöpyörää. Etäisyyden anturin kärjestä potilaan sarveiskalvoon on oltava noin 5 mm (ks. kuva alla). Vie tonometri kohti potilaan silmää niin, että anturi osoittaa sarveiskalvon keskikohtaa, kunnes potilaan otsa osuu laitteen otsatukeen. Varmista, että anturi on vaakasuorassa ja osoittaa suoraan kohti sarveiskalvon keskipistettä. Säädä anturin kärjen etäisyyttä potilaan silmän sarveiskalvosta kiertämällä otsatuen säätöpyörää. Potilaan silmänpaine voidaan mitata sekä makuu- että pystyasennossa (istuen tai seisten). Varo, että laite tai anturi ei vahingossa osu potilaan silmään.

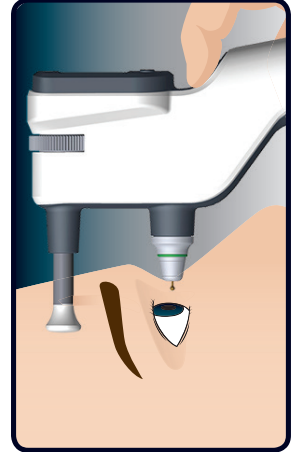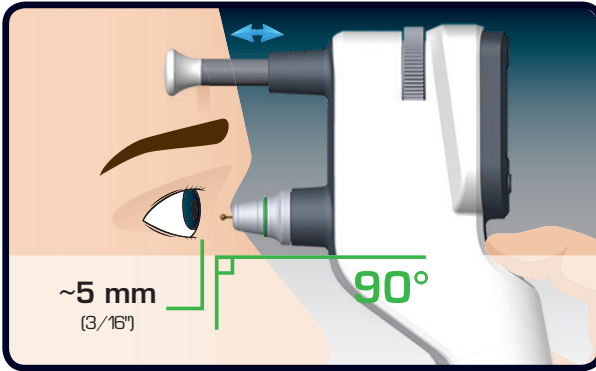

5. Mittausten aikana anturi koskettaa silmää: Kun painat mittauspainiketta ja pidät sen pohjassa, laite tekee kuusi mittausia peräkkäin. Vaihtoehtoisesti voit painaa painiketta lyhyesti kuusi kertaa, jolloin laite tekee yhden mittauksen kerrallaan. Näyttöruudulla näkyvän ympyrän harmaat osat muuttuvat yksitellen sinisiksi.



YKSI LYHYT ÄÄNIMERKKI —

Ilmoittaa yhden mittauksen onnistuneen.


KAKSI ÄÄNIMERKKIÄ — —

Ilmoittaa yhden mittauksen epäonnistuneen. (Katso virheilmoitukset käyttöohjeista).

PITKÄ ÄÄNIMERKKI ———

Ilmoittaa, että kuusi perättäistä mittaus onnistui ja silmänpainetulos näkyy näytössä.

NÄYTTÖ MITTAUSTEN AIKANA

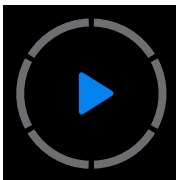

Ennen mittaus



Toisen mittauksen
jälkeen



Kuudennen
mittauksen jälkeen




Kuudennen
mittauksen jälkeen,
jos mittaus tulokset
vaihtelivat
hyväksyttävissä rajoissa



Kuudennen
mittauksen jälkeen,
jos mittaus tulokset
vaihtelivat liikaa

TONOMETRIN OSAT

1. Otsatuki
2. Anturin kanta
3. Anturin kannan paikalleen kiinnittävä holkki
4. Näyttö
5. Otsatuen säätöpyörä
6. Käyttöliittymän siirtymispainikkeet
7. Valintapainike
8. Mittauspainike

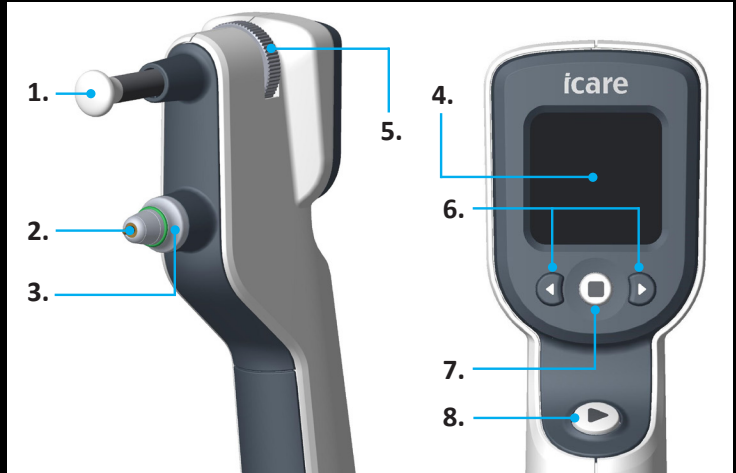

VOIT PIDENTÄÄ HUOLTOVÄLIÄ VAIHTAMALLA ANTURIN KANNAN SÄÄNNÖLLESTI.

ANTURIN KANNAN VAIHTAMINEN

1. Sammuta tonometri.
2. Kierrä anturin kannan holkki käsin irti ja laita se talteen.
3. Vedä anturin kanta irti tonometrasta tarttumalla siihen pinsettiotteella.
4. Aseta tonometriin uusi anturin kanta.
5. Kierrä holkkia, kunnes anturin kanta on tiukasti paikallaan.

